

Aplique o curativo com o Soft Port longe da ferida sobre a pele íntegra. Certifique-se de que o Soft Port está localizado na parte superior da ferida e que a ferida é central mantendo no espaço restante disponível do curativo.



Passe suavemente a mão sobre a borda do curativo garantindo a fixação por completo evitando a formação de dobras. Você pode reposicionar o adesivo sem perder adesividade para remover as dobras da borda adesiva.

O Sistema de Terapia por Pressão Negativa Avelle™ é indicado para:

- Incisões Cirúrgicas
- Feridas Crônicas
- Feridas Agudas
- Feridas Traumáticas
- Feridas Subagudas e Deiscências
- Retalhos e Enxertos
- Feridas com baixo a moderado exsudato

Para maiores informações sobre o produto consulte a bula que encontra-se dentro da embalagem.



Conecte firmemente o tubo extensor ao equipamento e ao curativo, girando os conectores.



Pressione e segure o botão azul na frente do equipamento por 3 segundos para iniciá-lo.

3-4
DIAS

O tempo médio de uso é de 3-4 dias

7
DIAS

O tempo máximo de uso do curativo é de 7 dias

Solicite o equipamento e os curativos separadamente

ICC	SAP CVT	Apresentação	Tam. da área de contato	Quantidade por Caixa	Registro ANVISA
421551	1713632	Equipamento Avelle	N/A	1	80523020055
421921	1718824	Tubo Conector Avelle	N/A	5	80523020056
421552	1713633	Curativo Avelle 16 cm x 16 cm	8 cm x 8 cm	5	80523020056
421553	1713634	Curativo Avelle 16 cm x 21 cm	8 cm x 13 cm	5	80523020056
421554	1713635	Curativo Avelle 12 cm x 21 cm	4 cm x 13 cm	5	80523020056
421555	1713636	Curativo Avelle 12 cm x 31 cm	4 cm x 23 cm	5	80523020056
422155	1721223	Curativo Avelle 12 cm x 41 cm	4 cm x 33 cm	5	80523020056
422156	1721224	Curativo Avelle 21 cm x 26 cm	13 cm x 18 cm	5	80523020056
422157	1721225	Curativo Avelle 26 cm x 26 cm	18 cm x 18 cm	5	80523020056

1. ASSESSMENT OF THE IN-VITRO PROPERTIES AVELLE™ NEGATIVE PRESSURE WOUND THERAPY DRESSING. WHRI4520 MS128. Data on file. 2015. ConvaTec. 2. Waring MJ, Parsons D. Physico-chemical characterisation of carboxymethylated spun cellulose fibres. Biomaterials. 2001;22:903-912. 3. Walker M, Hobot JA, Newman GR, Bowler PG. Scanning electron microscopic examination of bacterial immobilisation in a carboxymethylcellulose (AQUACEL®) and alginate dressings. Biomaterials. 2003;24(5):883-890. 4. HFM-2015/017. Data on file. 2015. ConvaTec Inc.

0800-7276-115
www.convatec.com.br
f/convatecbrasil

ConvaTec

**Quando duas forças se combinam,
coisas incríveis acontecem.**




Cod.: 1722210

Apresentando o primeiro sistema que combina a Terapia por Pressão Negativa com a Tecnologia Hydrofiber® ConvaTec

Terapia por Pressão Negativa portátil, descartável, simples e discreto:

- Fácil de usar
- Pequeno e portátil
- Silencioso, sem alarme
- Com uma vida útil de 30 dias †

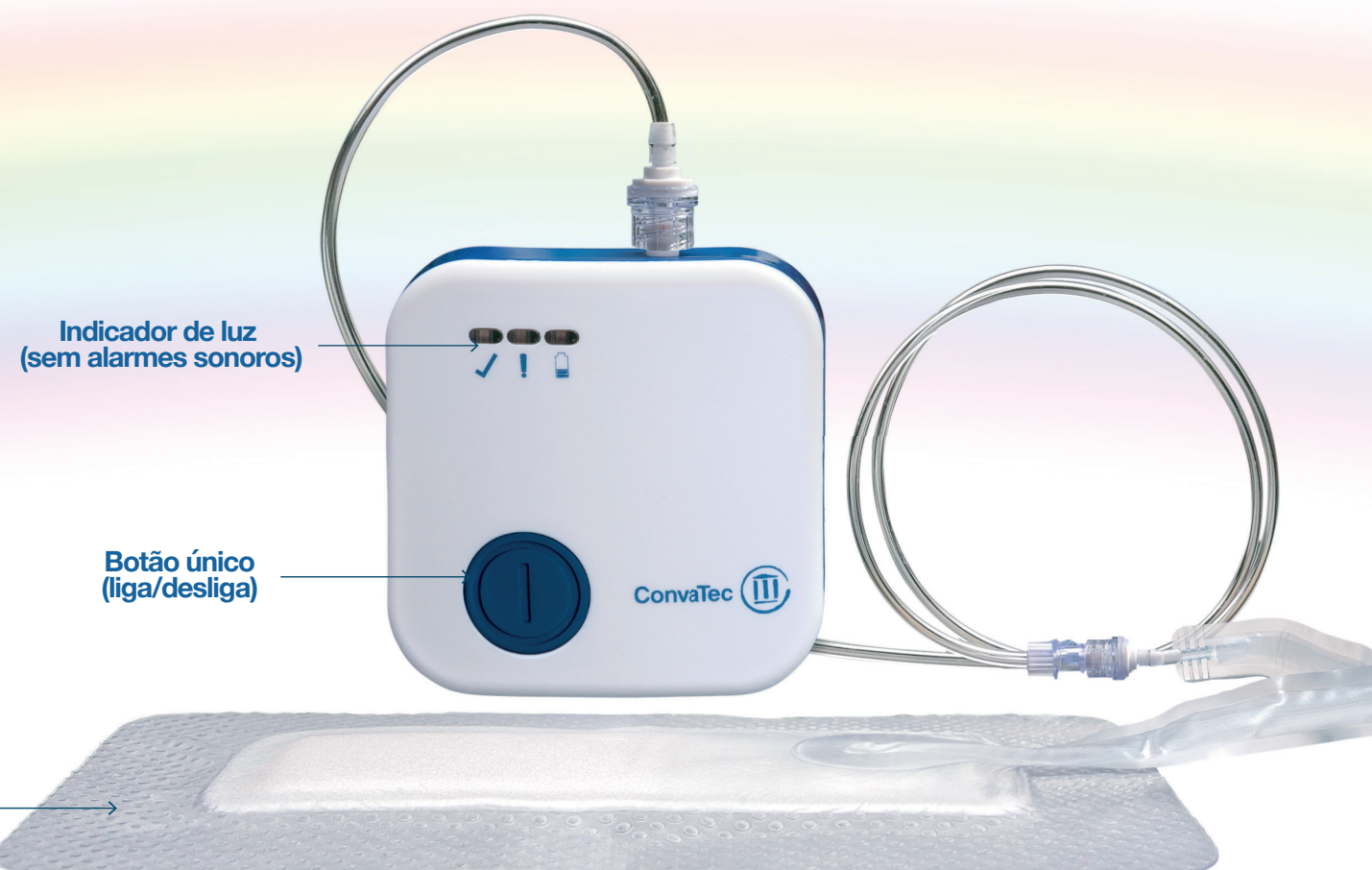


Projetado para maior flexibilidade

- Adequado para o uso em diferentes configurações de cuidados
- O equipamento e os curativos são comercializados separadamente
- Promove aos pacientes a retomada da vida normal.

Borda adesiva
de silicone suave 1*

Curativo com Tecnologia Hydrofiber® desenhado para proporcionar Terapia por Pressão Negativa

Avelle™ combina a Terapia por Pressão Negativa com os benefícios da Tecnologia Hydrofiber®, desenhada para criar um ambiente úmido que favorece a cicatrização

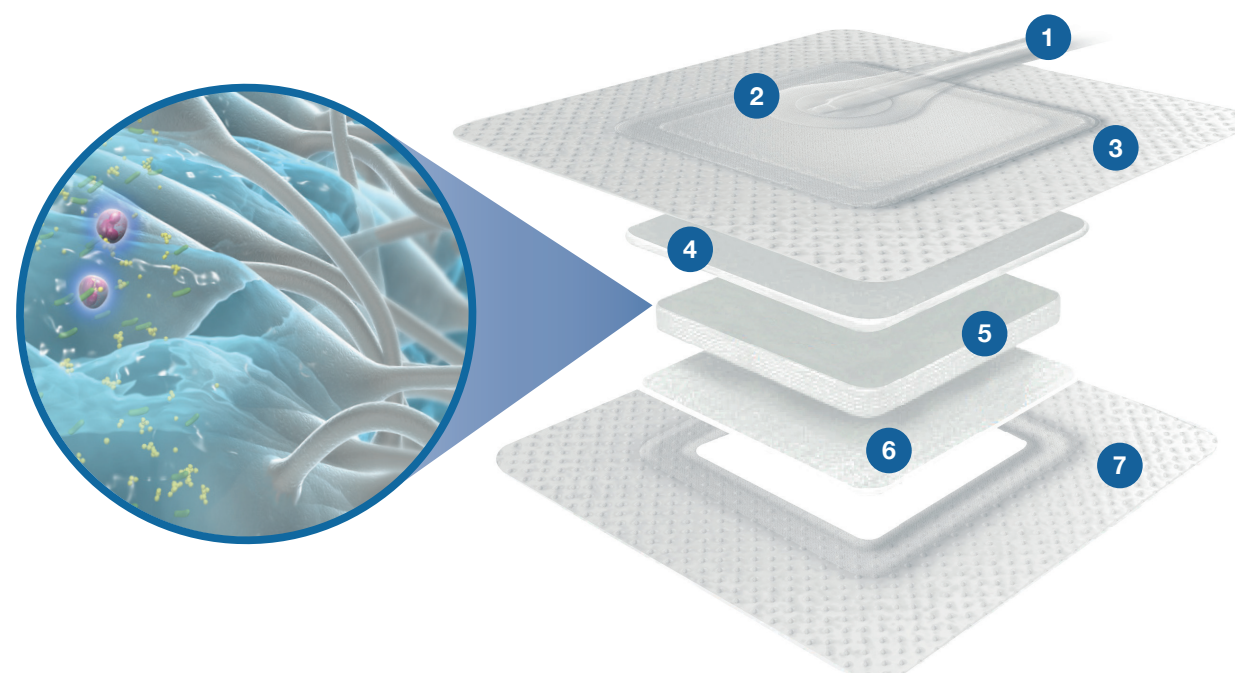

- 1 Conector do curativo
- 2 Conector Soft Port
- 3 Película impermeável de poliuretano
- 4 Camada de espuma de poliuretano
- 5 Núcleo com 8 camadas de Tecnologia Hydrofiber®
- 6 Camada de Tecnologia Hydrofiber® 1,2,3,4 *
- 7 Camada de silicone adesiva suave 1*

* Demonstração *in-vitro*.

† Pode ser necessário a troca da bateria durante a vida útil do equipamento.